

SK-DW001

Mesa de operaciones veterinaria manual




SK-DW001

Mesa de operaciones veterinaria manual



MATERIAL

La mesa está hecha de acero inoxidable 304 de alta calidad, que es resistente a la corrosión y fácil de limpiar. La base está hecha de placa de acero Q235 rociada.

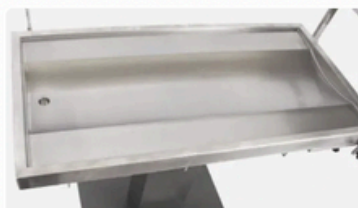

SUPERFICIE DE LA MESA

La superficie de la mesa en forma de U inmoviliza a los animales de manera efectiva, previene el desbordamiento y la salida de aguas residuales; y está equipada con una salida de aguas residuales.



GANCHO PARA CORREAS

Seis ganchos de correa de acero inoxidable, que pueden envolver correas para inmovilizar a los animales.




AJUSTE DE INCLINACIÓN DE DOS DIRECCIONES

La inclinación de la cabeza y la cola en dos direcciones se ajusta mediante tornillo manual, tornillo con bloqueo de manga de rosca, previniendo efectivamente la operación incorrecta.



RUEDAS

Una rueda giratoria en la cabeza, dos ruedas direccionales en la parte trasera. Con cuatro patas que se pueden ajustar en diferentes pisos, para fijar la mesa al suelo.

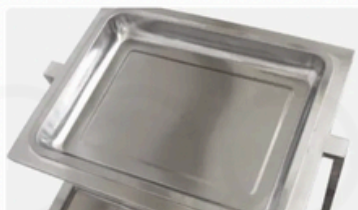

MESA MAYO

La mesa Mayo de acero inoxidable puede colocar los instrumentos quirúrgicos, y puede ser desmontada.



PÉRTIGA DE SUERO

Con una pértiga de suero y dos provisiones para pértiga de suero. La pértiga de suero puede colocarse debajo de la superficie de la mesa.



¿Qué Incluye?

Mesa Mayo	1 pieza
Ruedas	3 piezas
Patas	4 piezas
Pértiga de suero	1 conjunto



Parámetros Técnicos

Tamaño externo (LxAxH)	1000×500×830 mm
Carga segura de trabajo	150 kg
Trendelenburg inverso	0-15° (±2°)
Trendelenburg	0-15° (±2°)



Garantía

1 año de garantía	Nos comprometemos a ofrecerte no solo productos de alta calidad, sino también una tranquilidad total con tu compra.
Soporte Técnico Gratuito	Incluido
Reemplazo de piezas	Consulta disponibilidad