

SK-LLD7070A

Lámpara de operación LED



SK-LLD7070A

Lámpara de operación LED




TECNOLOGÍA DE MATERIAL

El caparazón de la lámpara está hecho de aleación de aluminio de alta calidad. La superficie adopta el proceso de pulverización electrostática de alto voltaje, y el polvo plástico antibacteriano importado y respetuoso con el medio ambiente que se utiliza garantiza que el producto cumpla con los requisitos de higiene quirúrgica.



BOMBILLA

Usando las perlas de lámpara LED originales importadas de Osram, Alemania, la vida útil promedio es de hasta 80,000 horas, que es 40 veces más larga que las lámparas halógenas. Bajo el mismo brillo, el consumo de energía del LED es solo 1/10 de la de las lámparas incandescentes ordinarias y 1/2 de la de las lámparas halógenas.

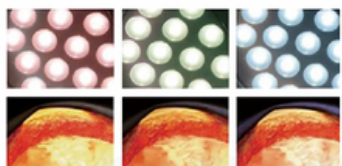

TEMPERATURA DE COLOR E ILUMINACIÓN

Usando una nueva fuente de luz LED de tipo frío, la iluminación puede alcanzar los 180,000 Lux, que puede realizar un ajuste continuo sin pasos y no múltiple. La temperatura de color está en el rango de 3700K-5000K, y el ajuste continuo no es de pasos múltiples. Mientras se cumple con la alta iluminación, ajuste los parámetros de iluminación según las necesidades de diferentes cirujanos, de modo que la percepción de la luz por parte del cirujano sea suave y sin reflejos.



REPRODUCCIÓN CROMÁTICA

El índice de reproducción cromática es de 85 a 98, lo que refleja verdaderamente el color de los tejidos humanos. Es adecuado para diversas escenas quirúrgicas y reduce en gran medida la fatiga visual del personal médico debido a operaciones a largo plazo.



AUMENTO DE TEMPERATURA

Aumento de temperatura (campo quirúrgico) menor a 1°C, esto puede evitar el secado de los tejidos debido a la alta temperatura y la rápida formación de coágulos de sangre en la herida.



MANIJA DE OPERACIÓN

La manija de desinfección montada en el medio se puede desmontar a voluntad, la resistencia a la temperatura es de más de 134°C, y la resistencia a la alta presión no es inferior a 205.8kPa, lo que es conveniente para la esterilización por vapor de alta temperatura y alta presión.



OTRAS FUNCIONES

Con el modo espejo de cavidad de una sola tecla, se puede cambiar fácilmente entre el modo estándar y el modo espejo de cavidad.



SK-LLD7070A

Lámpara de operación LED



¿Qué Incluye?

Partes del brazo giratorio	1 juego
Brazo de balance	2 juegos
Luz principal	1 juego
Luz auxiliar	1 juego
Mango	2 piezas
Fusible	4 piezas



Parámetros Técnicos

Diámetro del cabezal (mm)	700/700
Iluminación a 1m (Lux)	180000/180000
Rango de control de brillo	0-100% ajuste continuo
Temperatura de color (Kelvin)	3700-5000
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥95
Aumento de temperatura (Cabeza del cirujano) (°C)	≤1
Aumento de temperatura (Campo quirúrgico) (°C)	≤1
Irradiación total Ee (W/m2)	≤600+600
Potencia radiante Ee/Ec (mW/m2lux)	≤4
Profundidad de enfoque efectivo (cm)	60-130
Tamaño del punto de iluminación (cm)	16-28
Profundidad de iluminación L1+L2 (cm)	≥130
Tipo de bombilla	LED
Marca de la bombilla	OSRAM
Cantidad de bombillas	80+80
Potencia de la bombilla (W)	1
Vida útil promedio de la bombilla (horas)	≥80000



Garantía

1 año de garantía	Nos comprometemos a ofrecerte no solo productos de alta calidad, sino también una tranquilidad total con tu compra.
Soporte Técnico Gratuito	Incluido
Reemplazo de piezas	Consulta disponibilidad

