

MC054-ET77A

Carro de emergencias

**Entrega
Inmediata**



Configuración técnica

Tamaño
75×47.5×95cm

Configuración técnica

• Bandeja de desfibrilador	1ud
• Bandeja de lado deslizante	1ud
• Contenedor afilado	1ud
• Cesto de polvo	2ud
• Porta suero	1ud
• Tabla de RCP	1ud
• Soporte de botella de oxígeno	1ud
• Toma de corriente	1ud
• Bloqueo Central	1set
• Contenedor de Utilidad	1ud



MC054-ET77A

Carro de emergencias

**Entrega
Inmediata**

Material

Estructura de acero y aluminio en el interior, ABS y materiales antibacterianos en el exterior. Fácil de limpiar.




Toma de corriente

La toma de corriente es móvil y desmontable, fácil de usar, ubicada sobre la placa de RCP para facilitar el uso de cilindros de oxígeno.



Encimera Extensible

La encimera extensible transversal

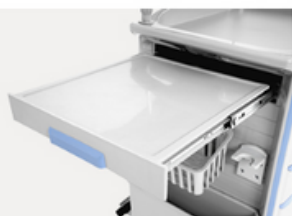

Portabotellas de oxígeno

Soporte para botella de oxígeno insertado y los cinturones fijados al cuerpo principal del carro,



Table-Board

Hay asas en ambos lados, superficie con vidrio suave transparente.



Bote de basura

Dos cubos de basura de ABS compartidos de una tapa.



Cajón

El cajón tiene un tamaño grande y más profundo. Cerradura centralizada, interior con particiones, puede estar bien organizado



Cesta de escombros

Con dos cestas para escombros en ambos lados, la grande es para dos recipientes afilados y la pequeña para desinfectante



Polo IV

El porta suero móvil puede intercambiar la posición con el estante del desfibrilador.



Estante para desfibrilador

La superficie de la placa está hecha de material ABS virgen. La posición del porta suero y el estante del desfibrilador se pueden intercambiar para facilitar su uso.



Ruedas

Ruedas con material de TPR, material de alta durabilidad. Carcasa antivuelco con unión sin tornillos. Pruebas superadas: 30km con 120kg de carga y superación de obstáculos 500 veces.

