

MC6k

Cama eléctrica
hospitalaria 3 funciones



MC6k

Cama eléctrica hospitalaria 3 funciones

Control de calidad importante

- * Serie Overcome
- * 3 funciones eléctricas
- * USFDA, EN60601, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A*A	2110*960*400-710mm
Plataforma de colchón	1925*820mm
Carga de trabajo segura	200kg
Ajuste de respaldo	0-75°(±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35°(±10°)

Configuración técnica

Motor lineal	3 piezas
Controlador de mano	1 pieza
Rueda cubierta de 5"	4 piezas
Barandilla lateral plegable	1 juego
Picero ABS con bloqueo seguro	1 juego
Soporte de Gotero	1 juego
Sujeción de soporte de gotero	4 piezas
Gancho de drenaje	4 piezas



MC6k

Cama eléctrica hospitalaria 3 funciones



Escanea Código
Vídeo de producto



ACERO I PINTURA

Baosteel® de Fortune Global 500.
11 procesos de pintura epoxi, prueba ASTM antibacteriana, 0.12mm de espesor de pintura, 60° de brillo, la pintura puede resistir hasta 50 kg de impacto.



DISEÑO

Diseño moderno, panel ignífugo insertado. Es fácil de limpiar e instalar. Peso neto es de 3.5kg.



PLÁSTICO

Plástico ambiental puede ser esterilizado a 100°C, con una tensión hasta 30 MPa.



PLATAFORMA

Plataforma estampada de superficie extra lisa sin marca de soldadura, con capacidad de carga de trabajo de 200kg. Opciones de plataforma de ABS y translúcida de resina para rayos x.

BUMPER COVER

Reduce the impact of the collision, safe and slinky.



BARANDILLA

Barandilla de aleaciones de aluminio con 6 columnas, con cerradura de seguridad.



MOTOR ELÉCTRICO

Motor lineal, con aprobación UL / ROHS / EN. Ruido debajo de 50dB, con movimiento de 20.000t.




RUEDAS

Ruedas de 5" con material de TPR, material de alta durabilidad. Carcasa antivuelco con unión sin tornillos. Pruebas superadas: 30km con 120kg de carga y superación de obstáculos 500 veces.



GANCHO DE DRENAJE

Gancho de drenaje, cortado por láser, colgado en ambos lados de la cama.

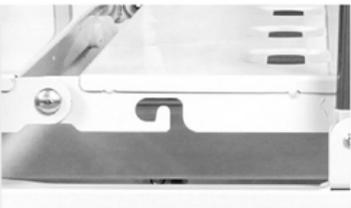

PORTA SUERO

Columna de acero inoxidable con gancho de plástico.

