


MC3008A1

Mesa de Operación Manual



MC3008A1

Mesa de Operación Manual

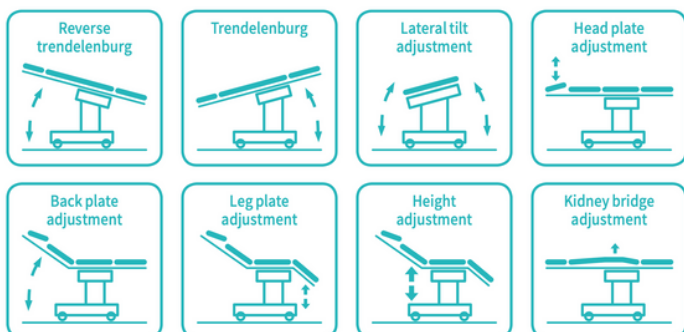

MC3008A1


Mesa de Operación Manual

Parámetros técnicos

Dimensiones Externo L*A*A	1940x480x770-1020 mm
Trendelenburg reverso	0-25°
Trendelenburg	0-25°
Inclinación lateral izquierda/derecha	0-20°
Placa de cabeza arriba/abajo	0-60°/0-90°
Placa trasera arriba/abajo	0-80°/0-10°
Placa de pierna hacia abajo	0-90°
Elevación del tablero de cintura	0-120mm

Configuración técnica

Marco de pantalla de anestesia	1 pieza
Control remoto	1 pieza
Asa del puente de riñón	1 pieza
Soporte de brazo	1 pieza
Soporte de pie	1 pieza
Colchón	1 juego
Soporte de hombro	1 par
Abrazadera de fijación larga	1 par
Abrazadera de fijación	8 piezas
Línea de alimentación	1 pieza

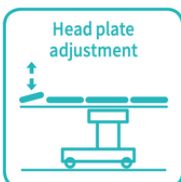

Lowest Position of Table Top
770mm



Highest Position of Table Top
1020mm



Trendelenburg
Reversed Trendelenburg
25°/25°



Lateral Tilt Left
0°-20°



Back Plate Upward
0°-80°



Back Plate Downward
0°-10°



Lateral Tilt Right
0°-20°



Leg Plate Down
0°-90°



MC3008A1

Mesa de Operación Manual


Aplicación

Esta mesa de operaciones es del tipo multifunción integral, adecuada para que las unidades médicas realicen diversas operaciones; todos los movimientos se controlan mediante manivelas manuales.



Material

La base, la columna y el soporte lateral están hechos de acero inoxidable 304 de alta calidad, que es anticorrosivo y se puede limpiar fácilmente.

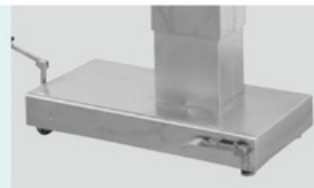

Sistema de control

Dispositivo de freno de pedal que permite mover fácilmente la mesa de operaciones.



Puente renal incorporado

Puente renal incorporado, apariencia más conveniente y agradable.




Hidráulico

El ajuste de altura controlado por bomba hidráulica.



Colchón


Funda de PU, colchón a medida, fácil desmontaje y limpieza, grosor del colchón: 6 cm.

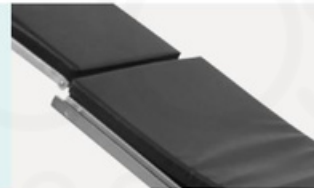

SOPORTE DE HOMBRO CON COJÍN



MARCO DE PANTALLA DE ANESTESIA

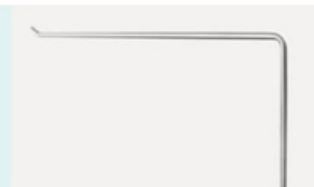

SOPORTE DE BRAZO CON COJÍN



APOYO PIERNAS CON COJÍN



SOPORTE CORPORAL CON COJÍN

