


MCT8K

Cama electrica infantil



FEATURES AND HIGHLIGHTS

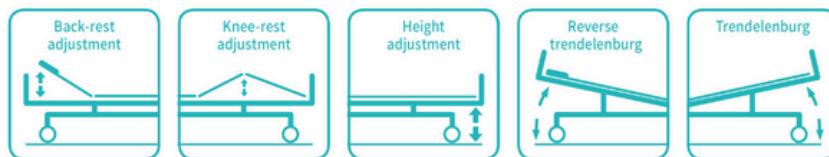

Control de calidad importante

* 5 funciones eléctricas

* USFDA, EN60601, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño (L*A*A)	1700*710*435-725mm
Plataforma de colchón	1485*640mm
Ajuste de respaldo	0-75°(±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35°(±10°)
Reverse Trendelenburg	0-12°
Trendelenburg	0-12°

Configuración técnica

Motor lineal	4 piezas
Ruedas de doble lado de 5" con bloqueo central	4 piezas
Barandilla lateral de aleación de aluminio con protección adicional	1 juego
Extremos de la cama de aleación de aluminio	1 juego
Soporte de gotero	1 pieza
Sujección de soporte de gotero	4 piezas
Gancho de drenaje	2 piezas



Design

Aluminum alloy side rail, 12-staff, providing full protection, meets safety standards and provide comforting feeling for patients.



Steels | Painting

Baosteel from Fortune Global 500 11 Process epoxy painting, ASTM testing anti-bacterial, paint thickness 0.12 mm, brightness 60°, paint can resist 50 kg impact.



Welding | Chassis

Panasonic robotic ensure, 360° full smooth welding Solid bed base made of 5.0 mm stamped rotating plate.



Electric Motor

Linear motor, with UL/ROHS/EN standard. Noise under 50 dB, with lifetime 20,000 times movement.



Head & Foot Board

The bed ends are integrally formed by PP blow molding, which is warm and beautiful and can effectively protect the bed and the patient from colliding with the wall.



Bed Platform

Stamping forming platform, smooth surface no welding scar, bearing 250KG load.



Braking System

Break spring keep qualified after 10,000times uninteruped break.



Wheels

5-inch double-sided casters, smooth and smooth running, durable with central locking. Castors with TPR tire, no worn-out after running 30KM, united forming without bolts.



Bumper Cover

Reduce the impact of the collision, safe and slinky.



Nurse Control

Hook type nurse control.



IV pole

Stainless Steel Column with plastic hook.



Drainage Hooks

Mobile plastic drainage hooks.

