


V6v5c

Cama eléctrica
hospitalaria 3 funciones

Parámetros técnicos

Tamaño exterior (LxAxA)	2085x1025x430-740mm
Plataforma del colchón	1925x900mm
Carga de trabajo segura	250kg
Ajuste del respaldo	0-75°(±10°)
Ajuste de rodilla	0-46°(±10°)
Indicador de ángulo	0-90°
Indicador de Posición	30°

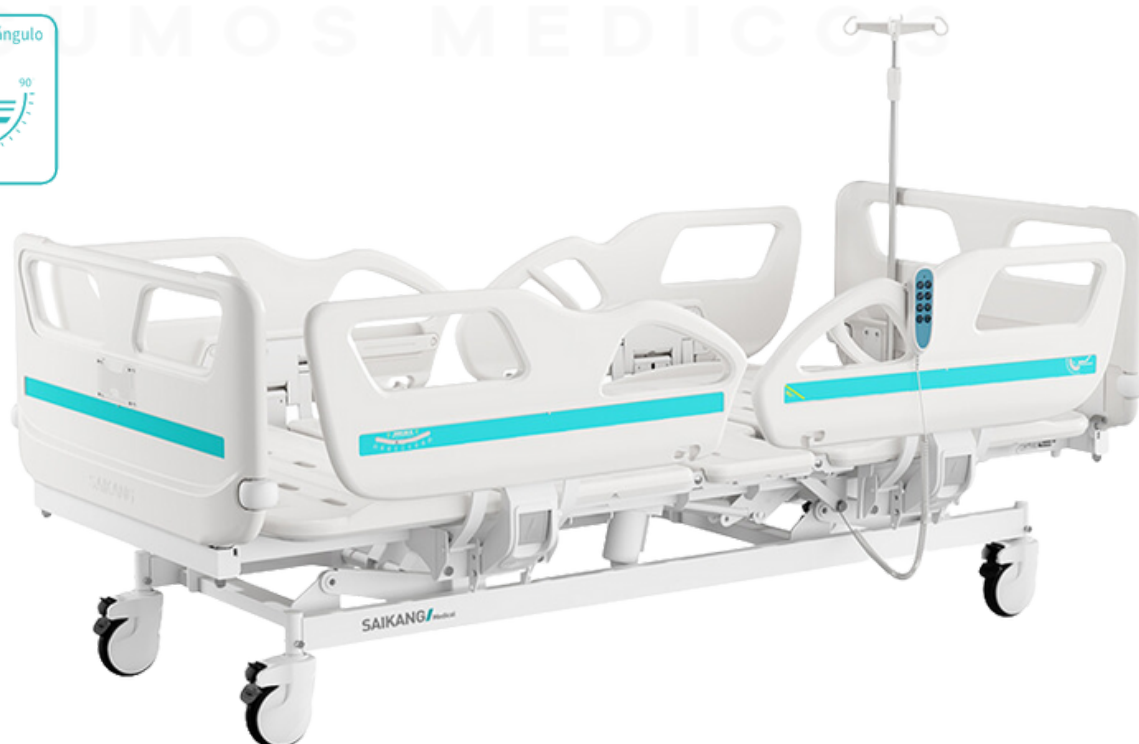

V6v5c

PLATAFORMA

Plataforma integrada de PP, adoptando tecnología de fabricación avanzada.

Plataforma de 4-5 secciones, permite una instalación independiente y un fácil mantenimiento.

Ampliar el área del asiento cuando la parte posterior se eleva, proporcionando más comodidad para los pacientes.

Reducir la depresión de la esponja en el panel del asiento.



CABECERA Y PIECERO DE CAMA

Cabecera y piecero simple y elegante, de tipo enchufable del material LG Chem fresh PP, fácil de instalar y de limpiar. Equipado con parachoque de un diámetro de 65 mm, evitando la colisión.



SA RUEDAS

Ruedas cubiertas de 5". TPR neumático no desgastado después de correr 10 km.

Anti-bobinado cubierta de cáscara dura, unidas sin los tornillos.

Pasa prueba dinámica: pasa obstáculos 40,000 veces, bajo la carga estándar de 200kg de toda la cama.



INDICADOR DE ÁNGULO

Con un indicador de ángulo integrado, demostrando claramente la posición del respaldo.



BARANDILLA

Barandilla lateral escamoteable con amortiguador integrado.

El asa integrada facilita a los pacientes levantarse/bajarse de la cama.



PORTA SUERO

Porta suero de acero inoxidable, con una capacidad de soporte de 15kg.



CONTROLADOR DE MANO

Con un cable en espiral flexible para facilitar el movimiento y el manejo en una posición óptima. La enfermera puede controlar todas las funciones estándar.




GANCHO DE DRENAJE

Gancho de drenaje de plástico, movable.



Carga de Trabajo Segura

250_{kg}

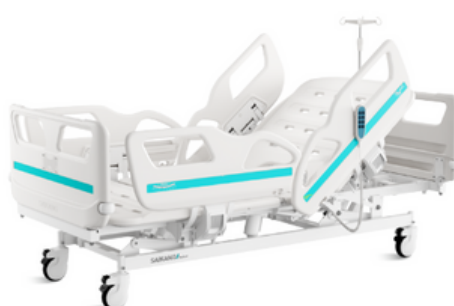

Ajuste del respaldo

75°



Ajuste de rodilla

46°